


# DigiSlim

Scale / Pèse-personne / Balanza

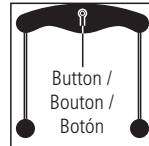

## Use and care

- Place the scale on a flat surface and tap with foot to turn on. Step on the scale and stand still – movement can make the reading vary.
- To change the unit of measure (kg, lb or st.), turn scale on and press the button on the back of the scale until the desired unit is selected.
- The scale turns off automatically after 8 seconds of inactivity.
- If the weight on the scale exceeds its weight limit (330 lbs or 150 kg), it will display "Err".
- Clean with a soft damp cloth. Do not use abrasive cleaners.
- Lithium-ion battery included.

Precision: 0.2 lb / 100 g. Do not use for legal trade. 1 year limited warranty.

## Utilisation et entretien

- Déposez le pèse-personne sur une surface plane et appuyez dessus du bout du pied pour l'allumer. Montez sur le pèse-personne et restez immobile. La mesure de poids peut varier si vous bougez.
- Pour changer l'unité de mesure (kg, lb ou st.), allumez le pèse-personne et appuyez sur le bouton au dos de ce dernier jusqu'à ce que l'unité de mesure désirée soit sélectionnée.
- Le pèse-personne s'éteindra automatiquement après 8 secondes d'inactivité.
- "Err" apparaît sur l'écran lorsque le poids sur le pèse-personne excède 330 lb ou 150 kg.
- Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Pile au lithium incluse.

Précision : 0,2 lb / 100 g. N'utilisez pas ce pèse-personne pour des prises de mesures légales. Garantie limitée de 1 an.

Questions? Comments? /  
Questions ? Commentaires ? /  
¿Preguntas ? ¿Commentarios?

**1-800-363-2381**  
**www.amgphysiologic.com**

## Uso y mantenimiento

- Coloque la báscula en una superficie plana y toque con el pie para activarla. Póngase de pie sobre la báscula y quédese quieto - cualquier movimiento puede hacer variar la lectura.
- Para cambiar la unidad de medida (Kg., lb. o sta.), active la báscula y pulse el botón situado en la parte posterior de la báscula hasta obtener la unidad deseada.
- La báscula se apaga automáticamente después de 8 segundos de inactividad
- Si su peso excede el límite de peso de la báscula (330 libras o 150 Kg.), la pantalla mostrará "Err".
- Límpiela con un paño suave y húmedo. No use productos abrasivos.
- Pila de iones de litio incluida.

Precisión: 0,2 lb. / 100 g. No la utilice para comercio legal.  
1 año de garantía limitada.

**Model / Modèle / Modelo :**  
**116-975**



Manufactured and printed in China for /  
Fabriqué et imprimé en Chine pour /  
Fabricado e impreso en China pour :  
AMG Medical Inc.  
Montreal, QC H4T 1V5 • **1-800-363-2381**